

YOUR EYES ARE PRECIOUS

Please read about your new contact lenses'

Instructions for Use

IMPORTANT

DESCRIPTION

MonthlyFine UV plus shows spherical lens design and available as a spherical lens for single vision.

This materials are based on a copolymer of 2-hydroxyethyl methacrylate cross-linked with ethylene glycol dimethacrylate. An UV absorbing compound is incorporated into the lens polymer. Further, this lens is tinted with blue to make the lens more visible for handling.

INTENDED USE

Correction of vision

INDICATIONS

MonthlyFine UV plus is indicated for daily wear for the correction of refractive ametropia (myopia and hyperopia) in not aphakic persons with non-diseased eyes.

INSTRUCTIONS OF USE

MonthlyFine UV plus is daily wear soft contact lenses and must be replaced monthly after opening. After removing your lenses from your eyes, follow the proper lens care regimen using a chemical disinfection system.

• Instructions on handling lenses

1. Keep your fingernails short and smooth to avoid scratching your eye or your lenses.
2. Always wash your hands with soap and rinse carefully before handling your lenses. Lenses may become contaminated if you do not wash your hands properly.
3. Always handle your lenses somewhere that is well lit, clean and sterile.
4. Your contact lenses may become damaged depending on how you handle them.

• Checking the lenses and blister packaging

1. Check which lenses are for the right eye and which lenses are for the left eye.
2. Check if there is anything wrong with the lenses and blister packaging before opening. If there is anything wrong, for example, if there is any damage or leakage, do not open and contact the point of purchase.

• Removing the lenses from the blister packaging

1. Break off the blister packaging by folding down the sides.
2. Remove the label, keeping a firm hold on the blister packaging and the label. When doing this, be careful not to cut your hand on the blister packaging or label. Also note that the lens storage solution inside the blister packaging may splash upon removal of the label.
3. Remove the lens from the blister packaging by sticking the lens to the pad of your index finger. Alternatively, turn the blister packaging upside down and empty the lens together with the storage solution into the palm of your hand. Take care, because if you dig your nail into the lens or scrape the lens on the rim of the blister packaging upon removal, the lens may be damaged.

• Checking the lenses and blister packaging

1. Hold the edges of the lens from the side and gently move up and down to remove the liquid.
2. Put the concave surface on the index finger of your dominant hand and verify the shape (fig. 1 and 2). Ensure that the lens is not inside out.

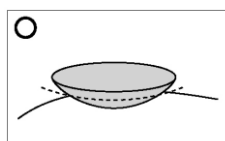


fig. 1

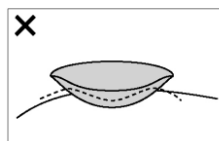


fig. 2

3. Check if there is anything wrong with the lens, for example, deformation, discoloration, foreign matter, damage,

scratches, and dirt. Do not wear the lens if there is anything wrong with it.

▪ **Inserting lenses**

1. Put the lens onto your index finger, and, with the middle finger of the same hand, pull down your lower eyelid. With the index finger of your other hand, pull up your top eyelid. If you pull up the eyelid with your finger on your eyelash line, you can open your eyes wide.
2. Look in the mirror so that your cornea comes into the center of your eye. Slowly bring the lens close to your eye and put it gently in place, still looking in the mirror. If you glance upwards when doing this, the lens will not be properly centered on your cornea.
3. When you have placed the lens properly on the cornea, slowly remove your index finger and then remove your fingers which had been holding your eyelids, starting with the bottom lid first and then the top lid. If you remove your fingers quickly and blink your eye shut, the lens may change position or fall out.
4. Check in the mirror that the lens is on top of your cornea and, covering the opposite eye with your hand, check your eyesight in your right and left eyes.
5. Follow the same procedure to fit the lens onto your other eye.

▪ **Removing the lenses**

1. Check the position of the lens in the mirror.
2. Looking straight in the mirror, hold the mirror upward and look at the eye reflected in the mirror.
3. With your middle finger, slowly pull your lower lid down, and with the index finger of the same hand, move the lens down from the cornea.
4. In this position, use the pads of your thumb and index finger to gently take hold of the bottom of the lens. To avoid scratching your eye, take care not to touch your eye directly with the tips of your fingers or your fingernails.

If you are unable to remove the lens, blink several times and then try again.

▪ **Lens care**

1. Since protein and lipids in your tears will deposit on the surface of your contact lenses as you wear them, it is important to follow the lens care regimen for washing, rinsing, disinfecting and storing your lenses. Failure to follow the lens care regimen causes lenses to become dirty and may result in serious eye disorder or eye infection.
2. Use lens care products suitable for soft contact lenses.
3. Use lens care products according to their accompanying booklet or instructions.
4. The extent to which lenses become dirty varies from person to person. If your lenses tend to become dirty, try rubbing your lenses with a cleaning solution or using a protein removal liquid/tablet. If the dirt does not come off, replace it with a new one even if you have not worn the lens for a full month.
5. When following the lens care regimen, use a plug or contact lens sink mat to prevent the lenses from being washed away.
6. Replace your lens case roughly every one or two months. Prolonged use will result in a proliferation of bacteria due to the build-up of dirt, rendering disinfection inadequate and leading to eye disorders.

CONTRAINDICATIONS

1. Medical conditions

Acute and sub-acute inflammation of the anterior eye, eye infection, uveitis, reduced corneal sensitivity, extreme dry eye condition or lacrimal apparatus disease that poses a problem for wearing lenses. Extensive eyelid disorder or allergy condition that affects the wearing of lenses. Other diseases that would hinder the use of contact lenses.

2. Environmental conditions

Anyone living or working in dry environments.

Anyone living or working in an environment where dust or chemicals are likely to enter the eye.

3. Personal qualities

Anyone who cannot follow the recommendations of their eye care practitioner, anyone who cannot use contact lenses properly, anyone who fails to attend regular check-ups, anyone who cannot follow the hygiene routine required to wear contact lenses, anyone who has an extremely nervous disposition.

WARNINGS

• Even when used properly, they may cause eye disorders such as the following, and if left untreated, these eye disorders may become serious or may result in loss of sight. To wear your contact lenses safely, be sure to read this Instruction for Use carefully and to follow the instructions of your eye care practitioner and the proper methods for handling contact lenses.

Example for eye disorders

- Corneal edema
 - Corneal ulcer
 - Corneal infiltration
 - Corneal epithelial erosion
 - Keratitis (including infectious keratitis)
 - Conjunctivitis (including giant papillary conjunctivitis)
 - Possibility of speeding up reduction in corneal endothelial cells
 - Possibility of changing the shape of the cornea
- Lenses may be damaged or become damaged. If you have inadvertently worn a lens which is damaged or otherwise faulty, or if a lens becomes damaged while you are wearing it, remove the lens immediately and consult your eye care practitioner immediately, regardless of whether you have any subjective symptoms.

PRECAUTIONS

• Be sure to read this Instruction for Use carefully before using your contact lenses, and if you are in any doubt about the terms or information contained herein, please consult your eye care practitioner for clarification before using the lenses.

- Retain this Instruction for Use for future reference.

1. Do not wear contact lenses that are damaged.
2. Do not use contact lenses past their expiration date.

This is a daily wear soft contact lenses which must be replaced on a monthly basis.

3. Do not wear contact lenses for longer than the recommended wearing period.
4. Use contact lenses properly in accordance with recommended methods for handling contact lenses.
5. Always attend regular contact lens check-ups.
6. If you experience any problem at all, consult your eye care practitioner immediately.
7. Always insert lenses promptly after opening, as lenses may become contaminated. If you do not use straight away, store according to the instructions of lens care products.
8. Avoid rubbing your eyes while wearing lenses, as this may result in scratches to your eyes or displacement of the

lenses.

9. Do not mix up right and left lenses, as doing so may result in impairment of vision and discomfort.
10. Make sure you have appropriate glasses to use in case you are unable to wear your contact lenses due to the condition of your eyes or for other reasons, or after you have worn your lenses for the wearing period recommended by your eye care practitioner. Continuing to wear your contact lenses regardless may cause eye disorders or other problems.
11. Do not wear contact lenses for driving or operating machinery until you are used to them.
12. If a lens becomes decentered or falls out while you are driving or operating machinery, stop driving or operating the machinery promptly after making sure that it is safe to do so.
13. Follow the instructions of your eye care practitioner if using eye drops while wearing contact lenses.
14. Do not allow cosmetics(eyeliner/mascara), pharmaceutical(cleansing products) or other substances to come into contact with your lenses as the chemicals will deposit on your lenses through your tears and may result in discoloration or deterioration in the quality of the lenses, making them unusable.
15. When your eyes are exposed to strong wind (when riding a motorbike or bicycle, skiing, in strong wind, etc.), always use some kind of protection against the wind such as sunglasses or goggles. Failure to do so may result in uncomfortably dry lenses or the loss of a lens.
16. Always remove your lenses for swimming, as failure to do so may result in problems such as an eye disorder or the loss of a lens.
17. Always remember to take spare lenses and glasses with you when you go on a trip, etc. in case you lose or damage your lenses.
18. If solvents such as household detergents get in your eyes, remove your lenses immediately, and consult your eye care practitioner. In such cases, it is advisable to not rely on your own judgment in deciding to use eye drops, etc.
19. Never wear someone else's lenses or give your lenses to someone else, as this may result in problems such as use of the wrong lenses or eye disorders.
20. Do not wear on top of other lenses, as doing so may result in problems such as eye disorders.
21. Do not use anything other than lens care products (for example, tap water) to care for your lenses. Also do not use a mixture of different types of lens care products, as this may result in eye disorders or cause deformation of the lenses, making them unusable.
22. Users who find it difficult to insert or remove contact lenses themselves such as children or elderly people should consult their eye care practitioner for appropriate guidance.
23. Pregnant women may experience some difficulty wearing contact lenses that were once comfortable or experience a temporary deterioration in their vision, and they should seek appropriate guidance where necessary.
24. People who suffer with allergies may be more prone to diseases of the eyes and skin than other users, and they should seek appropriate guidance where necessary.
25. Use of contact lenses may be affected by illness, pregnancy, childbirth, use of medications, physical condition, eye conditions, and living environment. The conditions in which you wear contact lenses may also change after you have started wearing contact lenses. Always seek appropriate guidance where necessary.

POTENTIAL ADVERSE EFFECTS

—Until you are used to your lenses—

Until you are used to your lenses, you may experience symptoms such as the following. Symptoms vary from person to person but will gradually diminish as you become used to your lenses. However, if you experience acute

symptoms or if symptoms persist, stop wearing your lenses and promptly consult your eye care practitioner.

- Slight discomfort
- Slightly bloodshot eyes
- Unstable vision
- Watering eyes



SEED Co., Ltd.
2-40-2 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8402, Japan



4/2020

Meaning of symbols

Symbol	Meaning	Symbol	Meaning	Symbol	Meaning
P	Power	BC	Base curve	DIA	Diameter
LOT	Batch code		Manufacturer		Use by date
	Sterilized using steam or dry heat		Caution/Consult Instructions for Use		

MATA ANDA AMAT BERHARGA

Sila baca Arahan Penggunaan

kanta lekap baharu anda

PENTING

KETERANGAN

MonthlyFine UV plus menunjukkan reka bentuk kanta sfera dan boleh didapati sebagai kanta sfera penglihatan tunggal.

Bahan ini berdasarkan kopolimer 2-hidroksietil metakrilat yang bersilang dengan etilena glikol dimetakrilat. Sebatian penyerap UV dimasukkan ke dalam polimer kanta. Selanjutnya, kanta ini diwarnai dengan warna biru untuk menjadikan kanta lebih kelihatan untuk dikendalikan.

TUJUAN PENGGUNAAN

Pembetulan penglihatan

INDIKASI

MonthlyFine UV plus disyorkan bagi pemakaian seharian untuk pembetulan ametropia biasan (miopia dan hiperopia) untuk orang bukan afakik dengan mata tidak berpenyakit.

ARAHAN PENGGUNAAN

MonthlyFine UV plus adalah kanta lekap lembut pemakaian seharian dan mesti diganti setiap bulan selepas dibuka. Setelah mengeluarkan kanta dari mata anda, ikuti regimen penjagaan kanta yang betul menggunakan sistem disinfeksi kimia.

• Arahan pengendalian kanta lekap

1. Pastikan kuku anda pendek dan licin untuk mengelak mencalarkan mata atau kanta lekap anda
2. Sentiasa basuh tangan anda dengan sabun dan bilas dengan teliti sebelum mengendalikan kanta lekap anda. Kanta lekap boleh tercemar jika anda tidak membasuh tangan anda dengan betul.
3. Sentiasa mengendalikan kanta lekap anda di tempat yang terang, bersih dan steril.
4. Kanta lekap anda boleh menjadi rosak bergantung kepada cara anda mengendalikannya.

• Memeriksa kanta lekap dan bungkusan blister


1. Periksa kanta lekap mana untuk mata kanan dan kanta lekap mana untuk mata kiri.
2. Periksa jika terdapat sebarang perkara yang tidak kena dengan kanta lekap dan bungkusan blister sebelum membuka. Jika terdapat sebarang perkara yang tidak kena, sebagai contoh, jika terdapat sebarang kerosakan atau kebocoran, jangan buka dan hubungi pusat pembelian.

• Mengeluarkan kanta lekap dari bungkusan blister

1. Patahkan bungkusan blister dengan melipatnya ke bawah.
2. Tanggalkan label, pegang dengan kuat pada bungkusan blister dan label. Apabila melakukan ini, hati-hati agar tidak melukakan tangan anda pada bungkusan blister atau label. Juga ambil perhatian bahawa larutan penyimpanan di dalam bungkusan blister boleh terpercik apabila menanggalkan label itu.
3. Keluarkan kanta lekap daripada bungkusan blister dengan melekatkan kanta lekap itu pada tapak hujung jari telunjuk anda. Sebagai alternatif, terbalikkan bungkusan blister itu dan keluarkan kanta lekap itu bersama-sama dengan larutan penyimpanan ke dalam telapak tangan anda. Berhati-hati kerana jika anda mencungkil atau mengikis kanta lekap dengan kuku anda pada bingkai bungkusan blister semasa mengeluarkan kanta, kanta lekap itu boleh rosak.

• Memeriksa kanta lekap dan bungkusan blister

1. Pegang tepi kanta lekap dari sisi dan gerakkan ke atas dan ke bawah perlahan-lahan untuk mengeluarkan cecair.
2. Letakkan permukaan cekung atas jari telunjuk tangan dominan anda dan periksa bentuknya. (Raj. 1 dan 2). Pastikan bahawa kanta tidak terbalik.

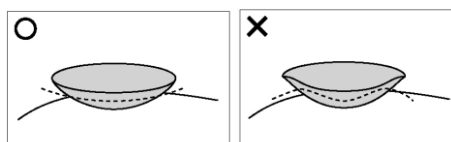

Raj. 1

Raj. 2

3. Periksa sama ada terdapat sebarang perkara yang tidak kena dengan kanta, sebagai contoh, kecacatan, kelunturan warna, bahan asing, kerosakan, calar dan kotoran. Jangan pakai kanta jika ada apa-apa yang tidak kena dengannya.

• **Memasukkan kanta lekap**

1. Letak kanta ke atas jari telunjuk anda, dan, menggunakan jari tengah tangan yang sama, Tarik ke bawah kelopak mata bawah anda. Menggunakan jari telunjuk tangan anda sebelah lagi, tarik kelopak mata atas anda. Jika anda menarik ke atas kelopak mata dengan jari anda pada garisan bulu mata, anda boleh buka mata anda dengan luas.
2. Lihat pada cermin supaya kornea anda berada di tengah-tengah mata anda. Dekatkan kanta lekap itu perlahan-lahan ke arah mata anda dan letakkannya dengan lembut, sambil anda masih melihat ke cermin, Jika anda memandang ke atas semasa melakukan ini, kanta lekap tidak akan betul-betul berada di tengah kornea anda.
3. Apabila anda telah meletakkan kanta lekap dengan betul pada kornea, alihkan jari telunjuk anda perlahan-lahan dan kemudian lepaskan jari-jari anda yang menahan kelopak mata, bermula dengan kelopak mata bawah diikuti dengan kelopak mata atas. Jika anda mengalihkan jari-jari anda dengan cepat dan berkelip menutup mata anda, kanta lekap itu boleh berubah kedudukan atau terjatuh.
4. Periksa di cermin bahawa kanta lekap itu adalah di atas kornea anda dan, dengan menutup sebelah mata dengan tangan anda, periksa penglihatan anda di mata kanan dan mata kiri anda.
5. Ikuti prosedur yang sama untuk memasangkan kanta lekap pada mata anda sebelah lagi.

• **Menanggalkan kanta lekap**

1. Periksa kedudukan kanta lekap di dalam cermin.
2. Pandang tepat ke dalam cermin, pegang cermin ke atas dan lihat pada mata dalam cermin.
3. Menggunakan jari tengah anda, tarik ke bawah kelopak mata bawah anda perlahan-lahan, dan menggunakan jari telunjuk tangan yang sama, gerakkan kanta lekap ke bawah daripada kornea.
4. Dalam kedudukan ini, cubit sedikit kanta antara jari telunjuk dan ibu jari untuk memegang bahagian bawah kanta dengan perlahan-lahan.

Untuk mengelakkan mencalar mata anda, berhati-hati supaya tidak menyentuh mata anda secara langsung dengan hujung jari atau kuku anda.

Jika anda tidak dapat menanggalkan kanta lekap itu, kelipkan mata beberapa kali dan kemudian cuba lagi.

• **Penjagaan kanta**

1. Oleh kerana protein dan lipid di dalam air mata anda akan termendap pada permukaan kanta lekap semasa anda memakainya, ia adalah penting untuk mengikuti regimen penjagaan kanta untuk mencuci, membilas, membasmi kuman dan menyimpan kanta anda. Kegagalan mengikuti regimen penjagaan kanta menyebabkan kanta menjadi kotor dan boleh mengakibatkan gangguan mata yang serius atau jangkitan mata.
2. Gunakan produk penjagaan kanta yang sesuai untuk kanta lekap lembut.
3. Gunakan produk penjagaan kanta mengikut buku kecil atau arahan yang disertakan.
4. Sejauh mana kanta menjadi kotor berbeza dari orang ke orang. Sekiranya kanta anda mudah menjadi kotor, cuba gosokkan kanta anda dengan larutan pembersih atau gunakan cecair / tablet penyingkiran protein. Sekiranya kotoran tidak keluar, gantikannya dengan yang baru walaupun anda belum memakai kanta selama sebulan penuh.
5. Semasa mengikuti regimen penjagaan kanta, gunakan palam atau pelapik sinki kanta lekap untuk mengelakkan kanta daripada terhanyut.
6. Gantikan bekas kanta anda kira-kira setiap satu atau dua bulan. Penggunaan yang berpanjangan akan mengakibatkan perbiakan bakteria akibat penumpukan kotoran, menjadikan pembasmian kuman tidak mencukupi dan menyebabkan gangguan mata.

KONTRAIKANDIKASI

1. Keadaan perubatan

Keradangan mata anterior akut dan sub-akut, jangkitan mata, uveitis, sensitiviti kornea yang berkurangan, keadaan mata yang terlampau kering atau penyakit alat lakrima yang menjadi masalah jika memakai kanta, Gangguan kelopak mata atau tindak balas alahan yang teruk sehingga menjejaskan pemakaian kanta lekap.

Penyakit-penyakit lain yang akan menghalang penggunaan kanta lekap .

2. Keadaan alam sekitar

Sesiapa yang tinggal atau bekerja dalam persekitaran kering.

Sesiapa yang tinggal atau bekerja dalam persekitaran di mana habuk atau bahan kimia bermungkinan masuk mata .

3. Kualiti diri

Sesiapa yang tidak boleh mengikuti saranan pengamal penjagaan mata mereka, sesiapa yang tidak boleh menggunakan kanta lekap dengan betul, sesiapa yang gagal untuk mengikuti pemeriksaan doktor secara tetap, sesiapa yang tidak boleh mengikuti rutin kebersihan yang diperlukan untuk memakai kanta lekap, sesiapa yang ada pembawaan gementar yang melampau.

AMARAN

• Walaupun digunakan dengan betul, kanta lekap boleh menyebabkan gangguan mata seperti berikut, dan jika tidak dirawat, gangguan mata ini boleh menjadi serius atau boleh mengakibatkan hilang penglihatan. Untuk memakai kanta lekap anda dengan selamat, pastikan anda membaca Arahan Penggunaan ini dengan teliti dan ikuti arahan daripada pengamal penjagaan mata anda dan kaedah yang betul untuk mengendalikan kanta lekap.

Contoh gangguan mata

- Edema kornea
 - Ulser kornea
 - Infiltrasi kornea
 - Hakisan epitelial kornea
 - Keratitis (termasuk keratitis berjangkit)
 - Konjunktivitis (termasuk konjunktivitis papilari gergasi)
 - Kemungkinan mempercepatkan pengurangan sel-sel endotelial kornea
 - Kemungkinan mengubah bentuk kornea
- Kanta lekap boleh rosak atau menjadi rosak. Jika anda secara tidak sengaja memakai kanta lekap yang rosak, atau jika kanta lekap menjadi rosak semasa anda memakainya, tanggalkan kanta lekap itu dan jumpa pengamal penjagaan mata anda dengan segera, tidak kira sama ada anda mempunyai sebarang gejala subjektif.

LANGKAH BERJAGA-JAGA

• Pastikan anda membaca Arahan Penggunaan ini dengan teliti sebelum menggunakan kanta lekap anda, dan jika anda ragu-ragu tentang istilah atau maklumat yang terkandung dalam dokumen ini, sila rujuk pengamal penjagaan mata anda untuk mendapatkan penjelasan sebelum menggunakan kanta lekap.

• Simpan Arahan Penggunaan ini untuk rujukan di masa hadapan.

1. Jangan pakai kanta lekap yang rosak

2. Jangan memakai kanta lekap melebihi tarikh tamat tempohnya.

Ini adalah kanta lekap lembut pemakaian harian yang mesti digantikan setiap bulan.

3. Jangan memakai kanta lekap lebih lama daripada tempoh pemakaian yang disyorkan.

4. Gunakan kanta lekap dengan betul mengikut kaedah disyorkan untuk mengendalikan kanta lekap.

5. Sentiasa hadir pemeriksaan tetap kanta lekap.

6. Jika anda mengalami sebarang masalah, rujuk pengamal penjagaan mata anda serta merta.

7. Sentiasa memakai kanta lekap segera selepas pembukaan, kerana kanta boleh tercemar. Sekiranya anda tidak menggunakan segera, simpan mengikut arahan produk penjagaan kanta.

8. Elakkan menggosok mata anda semasa memakai kanta lekap, kerana ini boleh menyebabkan calar pada mata anda atau kanta lekap teranjak dari kedudukan asal..

9. Jangan campur adukkan kanta lekap kanan dan kiri, kerana berbuat demikian boleh mengakibatkan gangguan penglihatan dan ketidakselesaan.

10. Pastikan anda mempunyai cermin mata yang sesuai untuk digunakan sekiranya anda tidak dapat memakai kanta lekap anda kerana keadaan mata atau atas sebab-sebab lain, atau selepas anda memakai kanta lekap anda untuk tempoh pemakaian yang disyorkan oleh pengamal penjagaan mata anda. Meneruskan memakai kanta lekap anda tanpa mengira masa boleh menyebabkan gangguan mata atau masalah lain.

11. Jangan memakai kanta lekap untuk memandu atau mengendalikan jentera sehingga anda sudah biasa dengannya.

12. Jika kanta lekap beralih dari tengah atau terjatuh semasa anda memandu atau mengendalikan jentera, berhenti memandu atau mengendalikan jentera dengan segera selepas memastikan bahawa ia selamat untuk berbuat demikian.
13. Ikuti arahan pengamal penjagaan mata anda jika menggunakan ubat titis mata semasa memakai kanta lekap.
14. Jangan benarkan bahan-bahan kosmetik(celak/maskara), farmaseutikal(prodruk pembersihan) atau bahan-bahan lain terkena kanta lekap anda kerana bahan kimia akan termendap pada kanta lekap melalui air mata anda dan boleh menyebabkan kelunturan warna atau kemerosotan pada kualiti atau kanta lekap, menjadikannya tidak boleh digunakan.
15. Apabila mata anda terdedah kepada angin kencang (apabila menunggang motosikal atau basikal, bermain ski, dalam angin kencang, dll.) sentiasa menggunakan alat perlindungan daripada angin seperti cermin mata hitam atau gogal. Kegagalan untuk berbuat demikian boleh menyebabkan kanta lekap kering yang tidak menyelesaikan atau kehilangan kanta.
16. Sentiasa menanggalkan kanta lekap anda untuk berenang, kerana kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan masalah seperti gangguan mata atau kehilangan kanta lekap.
17. Sentiasa ingat untuk membawa bersama anda kanta lekap atau cermin mata gantian apabila anda dalam perjalanan, dll. sekiranya anda kehilangan atau merosakkan kanta lekap anda.
18. Jika bahan pelarut seperti detergen rumah terkena mata anda, tanggalkan kanta lekap anda serta merta dan berjumpa dengan pengamal penjagaan mata anda. Dalam kes sedemikian, adalah disarankan untuk tidak membuat pertimbangan anda sendiri dalam membuat keputusan untuk menggunakan ubat titis mata. dll.
19. Jangan sekali-kali memakai kanta lekap orang lain atau memberikan kanta lekap anda kepada orang lain, kerana ini boleh menyebabkan masalah seperti penggunaan kanta lekap yang salah atau gangguan mata.
20. Jangan pakai di atas kanta lekap lain, kerana perbuatan itu boleh menyebabkan masalah seperti gangguan mata.
21. Jangan gunakan apa-apa selain produk penjagaan kanta (contohnya air paip) untuk merawat kanta anda. Jangan gunakan campuran pelbagai jenis produk penjagaan kanta, kerana ini boleh menyebabkan gangguan mata atau menyebabkan perubahan bentuk kanta, menjadikannya tidak boleh digunakan.
22. Pengguna yang mendapati sukar untuk memasukkan atau menanggalkan kanta lekap mereka sendiri seperti kanak-kanak atau warga tua harus berjumpa pengamal penjagaan mata mereka untuk bimbingan sewajarnya.
23. Wanita hamil mungkin mengalami sedikit kesukaran memakai kanta lekap yang sebelum ini selesa atau mengalami kemerosotan sementara dalam penglihatan mereka, dan mereka perlu mendapatkan bimbingan sewajarnya.
24. Mereka yang mengalami alahan mungkin lebih terdedah kepada penyakit mata dan kulit berbanding pengguna lain, dan mereka harus mendapatkan bimbingan sewajarnya.
25. Penggunaan kanta lekap mungkin terjejas jika sakit, hamil, melahirkan anak, makan ubat-ubatan tertentu, atau jika keadaan fizikal, keadaan mata dan persekitaran hidup tidak memuaskan. Penglihatan atau tahap penyelesaian mata juga boleh berubah selepas anda mula memakai kanta lekap. Sentiasa mendapatkan panduan yang sewajarnya.

POTENSI KESAN BURUK

— Sehingga anda biasa dengan kanta lekap anda —

Sehingga anda biasa dengan kanta lekap anda, anda mungkin mengalami gejalagejala seperti berikut. Gejala berbeza-beza daripada seorang dengan yang lain tetapi akan berkurang secara beransur-ansur sehingga anda terbiasa dengan kanta lekap anda. Walau bagaimanapun, jika anda mengalami gejala akut atau jika gejala berterusan, berhenti memakai kanta lekap anda dan segera berjumpa pengamal penjagaan mata anda.



- Sedikit tidak selesa
- Mata sedikit merah
- Penglihatan tidak stabil
- Mata berair



SEED Co., Ltd.
2-40-2 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8402, Japan



Maksud simbol

Simbol	Maksud	Simbol	Maksud	Simbol	Maksud
P	Kuasa	BC	Lengkung dasar	DIA	Diameter
	Kod kelompok		Pengeluar		Tarikh guna sehingga
	Disterilkan dengan menggunakan stim atau haba kering		Awas / Rujuk Arahan Penggunaan		