


DISOP

Hidro Health H2O2

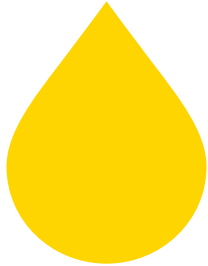

Sistem Peroksida Satu Langkah dengan Peneutralan tablet dan Penunjuk warna

Système au peroxyde
tout-en-un avec des
omprimés de neutralisation
et un indicateur de couleur

Sistema di perossido
monofase con compressa
neutralizzante e indicatore
di colore

MY Malay

hidro Health H2O2 adalah sistem peroksida satu langkah dengan tablet dan penunjuk warna peneutralan untuk pembasmian kuman harian dan pembersihan semua jenis kanta lekak (konvensional, pakai buang, hidrogel silikon, dan RGP). Tidak sesuai untuk lensa warna. Bebas bahan pengawet. Pembasmian kuman maksimum. Selesaikan proses pembersihan dan pembasmian kuman yang sangat cepat(1 jam)

Hidro Health H2O2 terdiri daripada:

- Larutan hidrogen peroksida disinfektan pada kadar 3%.
- Tablet peneutralan dengan vitamin B2 sebagai penunjuk warna, yang mengubah larutan hidrogen peroksida menjadi larutan garam bebas pengawet.

Tablet peneutralan tidak mula menghasilkan gelembung sehingga 12 minit ke dalam proses. Ini bermaksud lensa diredam dalam larutan disinfektan sebelum gelembung muncul yang mungkin menghalang bahagian kanta lekak daripada dibasmi kuman dengan betul, sehingga memastikan pembasmian kuman lengkap di seluruh permukaan kanta lekak.

Proses pembasmian kuman dan peneutralan sangat cepat dan selesai hanya dalam satu jam.

Hidro Health H2O2 juga menghilangkan protein dan mengandungi agen humektan untuk keselesaan tambahan.

Penunjuk Kegunaan

1. Basuh dan keringkan tangan anda sehingga bersih.
2. Isi bekas kanta lekak dengan larutan disinfektan Hidro Health H2O2 dengan berhati-hati sehingga mencecah anak panah, seperti yang ditunjukkan dalam rajah, untuk memastikan pembasmian kuman yang optimum. Penting untuk tidak mengisi kes di atas atau di bawah garis.



3. Masukkan dengan teliti setiap kanta lekak ke dalam akul kiri atau kanan yang sesuai, kemudian tutup bakul.
4. Tambahkan tablet peneutralan ke larutan.
5. Tutup rapat casing dan goncangkan perlahan-lahan ke atas dan ke bawah, pastikan tablet ada di dalam larutan.
6. Kira-kira 12 minit, anda akan melihat gelembung terbentuk di dalam casing, tablet akan larut dan cecair akan menjadi kuning.

7. Biarkan lensa merendam larutan sepanjang malam atau sekurang-kurangnya satu jam selepas menambahkan tablet untuk memastikan prosesnya selesai. Kanta lekak kemudian akan siap digunakan.
8. Sebelum membuka bekas kanta lekak anda, goncangkan dengan lembut untuk memastikan kandungannya diredam dengan betul dalam larutan akhir.
9. Keluarkan kanta lekak dan buang larutan pembersih dan pembasmi kuman, biarkan casing terbuka hingga kering. Sebaiknya bilas casing dengan larutan masin dan biarkan sehingga kering.

Langkah berjaga-berjaga

- Sentiasa gunakan kotak kanta lekak yang disertakan dengan produk, kerana gas yang dihasilkan semasa peneutralan dilepaskan.
- Sentiasa gunakan tablet yang disertakan dengan produk, kerana ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan penyelesaiannya dineutralkan dengan betul.
- Jangan gunakan produk jika meterai hilang atau rosak semasa dibuka pertama kali.
- Jangan gunakan produk selepas tarikh luput, dan selalu menggunakannya dalam tempoh 90 hari sejak dibuka.
- Jangan gunakan tablet jika lepuh rosak atau terbuka sebahagiannya, kerana tablet mengandungi bahan yang sensitif terhadap cahaya dan kelembapan.
- Jangan gunakan tablet yang tidak kelihatan seperti semula jadi, telah berubah warna atau kelihatan rosak.
- Selepas kira-kira 12 minit, gelembung mesti dilihat di dalam bekas kanta lekak.
- Jangan gunakan air biasa untuk membilas bekas atau kanta lekak selepas setiap penggunaan.
- Jangan minum larutan atau tablet.
- Sebelum menggunakan sebarang ubat, beritahu pakar anda bahawa anda menggunakan kanta lekak.
- **LARUTAN PEMBASMI KUMAN LAUNSGUNG TIDAK BOLEH HUBUNG DENGAN MATA** sehingga ia dineutralkan sepenuhnya oleh tablet peneutralan.
- **Lindungi produk dari cahaya dan simpan di tempat kering pada suhu 5 hingga 30 °C.**
- Larutan akhir mempunyai warna kekuningan dan boleh menjadikan kanta lekak menjadi sedikit kuning. Walau bagaimanapun, sebarang pewarnaan akan pudar serta-merta setelah ia berada di mata. Pewarnaan ini disebabkan oleh vitamin B2 yang terdapat di dalam tablet dan sama sekali tidak berbahaya bagi mata dan kanta lekak.
- Jangan gunakan kanta lekak jika larutan akhir tidak berwarna atau tidak menjadi kuning sedikit.

- Sekiranya ini berlaku, proses mungkin tidak berjaya diselesaikan atau anda mungkin lupa untuk menambahkan tablet. Sekiranya demikian, anda perlu memulakan proses semula dari langkah 1.
- Vitamin B2 sensitif terhadap cahaya. Oleh itu, penting untuk menyimpan tablet di dalam bungkusannya untuk melindunginya. Apabila anda sudah siap menggunakan tablet, tambahkan larutan dengan segera. Elakkan terkena cahaya matahari secara langsung.
- Setelah proses selesai, selalu buang larutan terakhir dan jangan gunakan semula. Biarkan bekas kanta terbuka sehingga kering.
- Kerana larutan terakhirnya bebas bahan pengawet, kanta lekak tidak boleh dibiarkan merendamnya lebih dari 48 jam. Sekiranya lensa dibiarkan dalam larutan bebas pengawet terakhir terlalu lama, lensa perlu dibasmi kuman semula.
- Pastikan botol ditutup rapat.
- Setelah anda menambahkan tablet, kanta lekak mesti disimpan di dalam bekas sekurang-kurangnya satu jam untuk mencapai peneutralan sepenuhnya. Jika tidak, hidrogen peroksida boleh menyebabkan rasa gatal dan sakit. Sekiranya ini berlaku, segera bilas mata anda dengan air biasa atau larutan masin.
- Sekiranya kesakitan berterusan, hentikan penggunaan produk, tanggalkan kanta lekak anda dan pergi ke pakar mata anda.
- Jangan gunakan produk jika anda alah terhadap komponennya.
- Jauhkan dari jangkauan kanak-kanak.
- Setiap paket sistem peroksida Hidro Health H2O2 dilengkapi dengan bekas kanta lekak baru. Jangan lupa untuk selalu membuang bekas lama anda.

Komposisi

Larutan pembasmi kuman:

Hidrogen peroksida 3.0%, monosodium fosfat, dan EDTA dalam air yang bersih.

Tablet peneutralan:

Natrium klorida, disodium fosfat, polyvinylpyrrolidone, vitamin B2 0.075 mg dan katalase 0.1 mg.



Disop
Avda. Valdeleparra, 31-A
28108 Madrid, España



0318

